

ARIANA Secure Fasten Wrist Holder With Ring:

Prevents pressure being exerted on the wrist. With safety D-ring. Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose to avoid allergies. Breathable and comfortable. Easy to adjust. Great restrain properties. Can be used interchangeably to restraint wrists or ankles.

• Benefits

Better tolerated by the patient. Prevent skin injuries by laceration and abrasion. Made of Hypoallergenic material. Saves time to nurses. More safety and comfort for the patient.



R.code	Size
AW 3010	Adult
AW 3011	Infant

دستبند و پابند نگهدارنده بیمار با حلقه فلزی مدل ARIANA :

برای نگهداری بیماران بی قرار در بخش های مختلف بیمارستانی و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب یا صدمه به آنان به کار می رود.

مزایای استفاده:

- جلوگیری از وارد آمدن فشار به مچ و با قوزک پای بیمار
- لایه داخلی نرم جهت جلوگیری از هرگونه آسیب به پوست بیمار
- بدون ایجاد هرگونه حساسیت پوستی و افزایش راحتی بیمار
- قابل تنظیم برای بیماران در سنین مختلف
- راحتی عملکرد برای پرسنل بخش

ARIANA Abdominal Safety Belt:

It is flexible and adapts to patient's waistline without bending. Safe and easy fastening by means of very strong polyester straps and light nylon rings. Fully padded with soft and breathable tissues. Inner layer made of %75 polyester and %25 viscose. Capable to absorb pressure maintaining its performances.

• Benefits

It does not strangle the patient and allows the postural movements. Facilitates nursing work. Comfortable for the patient.



نحوه استفاده از کمربند:

ابتدا با توجه به سایز بیمار کمربند را دور کمر بسته و نگه می داریم. سپس بندهای متصل به دو طرف را به صورت ضربدری قرار داده و از حلقه طرف مقابل رد می کنیم. انتهای بند را از تخت بیمار گذرانده و کشیده تا بیمار در موقعیت ثابتی قرار گیرد. انتهای بند را به تخت گره می زنیم.

R.code

AB 5002

کمربند نگهدارنده بیمار مدل ARIANA :

این کمربند برای کاهش احتمال افتادن یا سقوط بیماران از روی تخت و یا برانکارد و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به بیماران مختلف به کار می رود.

دستبند و پابند دائمی نگهدارنده بیمار مدل ARIANA:

پابند و دستبند نگهدارنده بیمار از جنس نرم نئوپرن (NeoPrene) بوده که برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب در بیماران بی قرار به کار می روند. این ابزار با سیستم قفل سریع علاوه بر کاربری آسان و محدود کردن بیماران، برای پرسنل در مواقع ضروری بسیار سریع و راحت می باشند. این دستبند و پابند برای بخش اورژانس، نروسرجری و ICU ها که زمان اهمیت حیاتی دارد، بسیار مناسب می باشند. همچنین دستبند و پابند ARIANA برای بیمار نیز بسیار راحت بوده و هیچ گونه آسیبی به پوست و اعصاب بیمار وارد نمی کند. طراحی قفل مغناطیسی جدید این محصول باعث راحتی کار پرسنل بوده و از جمله مزایای آن این است که فقط پرسنل مسئول می توانند آن را باز یا بسته نمایند.

ARIANA Anklebands:

Restraining neoprene ankle bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher due to psychiatric restraint problems. Closure with safety clip on the ankles.

ARIANA Wristbands:

Restraining neoprene wrist bands with double Velcro closure. Prevent injuries and falling out of bed or stretcher. Closure with safety clip on the wrists. Since psychiatric restraint is a delicate matter.



دستبند نگهدارنده اعصاب و روان مدل ARIANA:

دستبند مدل آریانا برای نگهداری بیماران بی قرار در بخش های ویژه بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. این دستبند با پد نرم قسمت داخلی آن، باعث راحتی بیمار شده و از ایجاد آسیب های مختلف در اثر فشار یا سایش به دست بیمار جلوگیری می کند. قفل مغناطیسی طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل درمانی شده و احتمال هرگونه آسیب را از میان برمی دارد.

ARIANA Wristbands:

The Ariana wristbands allow to ensure the patient's hands to the bed. These are fixed to the bed structure by a long adjustable band.

- The Controlled Mobility System work combined with the abdominal belt, passing the wristband band through the lower belt loop, thus limiting the movements outside the perimeter of the bed.
- The inside of the wristbands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
- The wristbands contains an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

پابند نگهدارنده اعصاب و روان مدل ARIANA:

پابند مدل آریانا همانند دستبند آن برای فیکس کردن پای بیماران بی قرار در بخش های ویژه بیمارستانی و نیز مراکز اعصاب و روان به کار می رود. قسمت داخلی آن با پد نرم باعث راحتی بیمار و جلوگیری از هرگونه آسیب در اثر فشار یا سایش به پای بیمار می شود. قفل مغناطیسی طراحی شده در آن موجب ایمنی بیشتر برای بیمار و راحتی پرسنل درمانی شده و احتمال هرگونه آسیب را از میان برمی دارد.

ARIANA Anklebands:

The Ariana anklebands allow to ensure the patient's feet to the bed. The set composes a strap fixed to the bed structure and two independent ankle bands that are fixed to the bed by locks.



Wristbands			Anklebands		
R.code	Color	Size	R.code	Color	Size
3050	●	S	3060	●	S
3051	●	M	3061	●	M
3052	●	L	3062	●	L
3053	●	XL	3063	●	XL



4 Lock buttons

1 Magnetic key

Harness with Thorax Band:

It inhibits patient vertically upward movement and is designed to be very flexible.

Thorax band hinders slipping and harness to be loosen.

The transversal strap part of the restraint stops fast and violent patient movement. Therefore, it prevents patient self injury or injuring others.

If patient is non violent the transversal strap can be removed.


This allows the patient to sit up and prevents slipping up.

If fixation to the belt is not used, harness bands can be used in parallel position. That is they are used in an uncrossed position.

This allows the restraint not to touch large patient's neck or prevent pressure on the patient's sternum.

کمربند مهار کننده قفسه سینه:

نگهدارنده قفسه سینه مانع از بلند شدن یا جابجایی بالاتنه ی بیمار می شود. این محصول دارای یک بند عرضی است که از حرکات شدید و خشن بیمار و در نتیجه احتمال آسیب به بیمار یا سایر افراد جلوگیری می کند. برای بیماران غیر تهاجمی امکان استفاده از این نگهدارنده بدون بند عرضی نیز میسر است که امکان تحرک بیشتر و راحت تر را به بیمار می دهد. در مدل ساده آن که نگهدارنده به کمربند متصل نیست بندها می توانند به صورت موازی قرار گیرند که این امر باعث کاهش تماس بندها با گردن و کاهش فشار روی ناحیه جناق سینه می شود.

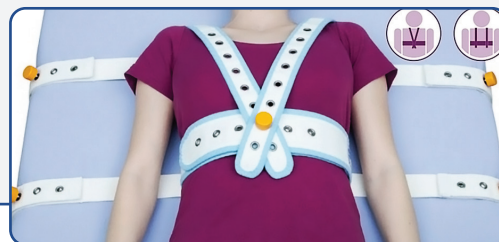

Harness with Thorax band

R.code
AWD3080

ARIANA Complete Set:

The complete set is the global solution of secure restraint for bedridden patients. It permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff, because of bed restraint is a not easy issue. As consists of individual elements can be used as required at the time.

Complete
Psycho Set

R.code

AWD3090



Abdominal Belt

R.code

AWD3070



ست کامل نگهدارنده اعصاب و روان مدل ARIANA:

ست کامل نگهدارنده بیمار بیشترین میزان امنیت را برای بیمار و پرسنل فراهم می کند. این ست کامل از قسمت های مختلفی تشکیل شده که با توجه به نیاز های متفاوت می تواند به طور جداگانه استفاده گردد. این سیستم در حال حاضر یکی از بهترین سیستم های نگهدارنده بیمار است.

ست کامل جایجایی بیماران اعصاب و روان:

این ست شامل یک جفت دستبند، پابند و یک بند می باشد که دستبند آن به یک کمر بند دوخته شده و توسط بند از پشت به قسمت پابند متصل شده است. این ست دست ها و پاهای فرد را در حالت مناسب و راحتی نگه می دارد و در عین حال از ایجاد صدمه به خود فرد و اطرافیان جلوگیری می کند. با استفاده از این ست امکان راه رفتن در قدم های کوچک و همچنین نشستن ایمن او فراهم می شود.


Complete Set for Ambulation:

Restraint consists of ankle bands, binding band, and a set of wristbands sewn onto the belt band. This restraint is designed to prevent patient aggression, manipulation, self injury, or access to the locks. It also holds the patient's leg and arms in a convenient position. It enables the patient to sit as well as taking short steps.

Complete Set
for Ambulation

R.code

AWD3040

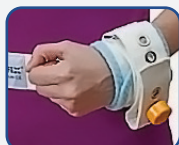

نگهدارنده ویلچری بیمار مدل ARIANA :

نگهدارنده ویلچری ARIANA برای استفاده ایمن و راحت بیمار جهت جلوگیری از مشکلات مربوط به ناپایداری بیمار ، لیز خوردن و افتادن به دلایل فیزیکی یا روانی ساخته شده است که به موجب طراحی ارگونومیک آن موجب سازگاری با بیماران مختلف می گردد.

این نگهدارنده از نوارهای محکم و مقاوم از جنس پلی استر ساخته شده که برای محافظت از بیمار و جلوگیری از ایجاد هرگونه آسیب به کار می رود. جنس آن از پارچه ی نرم پلی استر و کتان است ، به علاوه بخش هایی از نگهدارنده که فشار بیشتری را تحمل می کنند برای راحتی بیشتر بیمار از پدهای نرم ساخته شده اند. این محصول قابل شستشو در دمای ۴۰°C می باشد.

ARIANA Wheelchair Restraint Belt:

The belt have been designed to provide a simple but firm subjection to weak or unstable patients. ARIANA belts have different models to adequate to different needs. It is adjusted to the chair by means of strong polyester straps on both sides and tied together at the back of the seat. The belt is washable up to 40°C.



کمر بند ویلچری با قفل مغناطیسی

کمر بند ویلچری استاندارد

کمر بند نگهدارنده بیمار مدل ARIANA :

کمر بند نگهدارنده بیمار برای نگهداری بیماران بستری به کار می رود. کمر بند به تخت و یا بدنه برانکارد فیکس شده و امکان کنترل بیمار توسط پرسنل بخش را میسر می سازد. این کمر بند دور کمر بیمار قرار گرفته و احتمال افتادن و یا ایجاد هرگونه آسیب به بیمار را از بین می برد و در عین حال آزادی حرکت مناسبی برای بیمار ایجاد می کند. • در دو سایز L و XL

ARIANA Patient Restraint Belt:

For Bed or Strecher :

Articulated belt which secures the patient from falling down from bed or strecher allowing the patient to turn or change position. It is adapted to the patients waist by Velcro and an adjustable clasp.

- It is available in Large and XLarge strip



R.code	Size
ABD5000	XL
ABD5001	L

Transfer System Ariana:

Ariana Abdominal restraint belt is designed in two models of one and two parts and is used for prevention of patient from falling from the surgical bed or patient transfer beds.

The restraint belt is made of Neoprene material which reduces the pressure to the abdomen and as a result provides comfort for the patient.

This restraint belt is proper for use in surgical recovery rooms, on patient transfer beds, and on ICU beds.

In addition for use of this product on abdomen, it can be used to harness knee and leg

Ariana Belt
OP-1

R.code

ABD5010



Ariana Belt
OP-2

R.code

ABD5011

کمر بند نگهدارنده بیمار مدل Arianamed:

کمر بند نگهدارنده شکمی آریانامد در دو مدل یک تیکه و دوتیکه طراحی شده و برای محافظت از بیمار و جلوگیری از احتمال افتادن از تخت جراحی یا برانکارده به کار می رود.

جنس کمر بند از لاستیک نرم نئوپرن (Neo Prene) بوده که موجب کاهش فشار وارده به شکم و در نتیجه راحتی بیمار می شود.

این کمر بند مناسب برای استفاده در اتاق عمل و ریکاوری، برانکارده و نیز تخت بخش های مراقب ویژه می باشد.

این محصول علاوه بر استفاده شکمی جهت مهار زانو و پای بیمار به کار می رود.

Transfer System Ariana:

Innovative device that provide quick restraint with secure and safe transfer of altered, violent, aggressive or disoriented patients on emergency stretchers. It allows the transfer of patient from the emergency stretcher to other stretcher or bed, without release the restraint.

It consists in a resistant and durable mat provided of a set of harness, wristbands and ankle bands, with quick double velcro closure system and sliding base to improve the transfer.

ست انتقال بیمار مدل ARIANA:

این ست جهت ایجاد ایمنی و نگهداری بیماران بی قرار، غیرقابل کنترل و همچنین جلوگیری از افتادن سایر بیماران به کار می رود.

ست انتقال ARIANA به کاربران خود این اجازه را می دهد که بدون باز کردن سیستم های نگهدارنده متصل، بیماران را از برانکارده اورژانس به برانکارده یا تخت دیگر انتقال دهند.

این ست شامل یک کفی مقاوم و محکم است که بر روی برانکارده یا تخت بسته می شود و بر روی آن نگهدارنده قفسه سینه و کتف، دستبند و پابند با قفل های مغناطیسی قرار می گیرد.

Transfer System

R.code

AWD3010

